

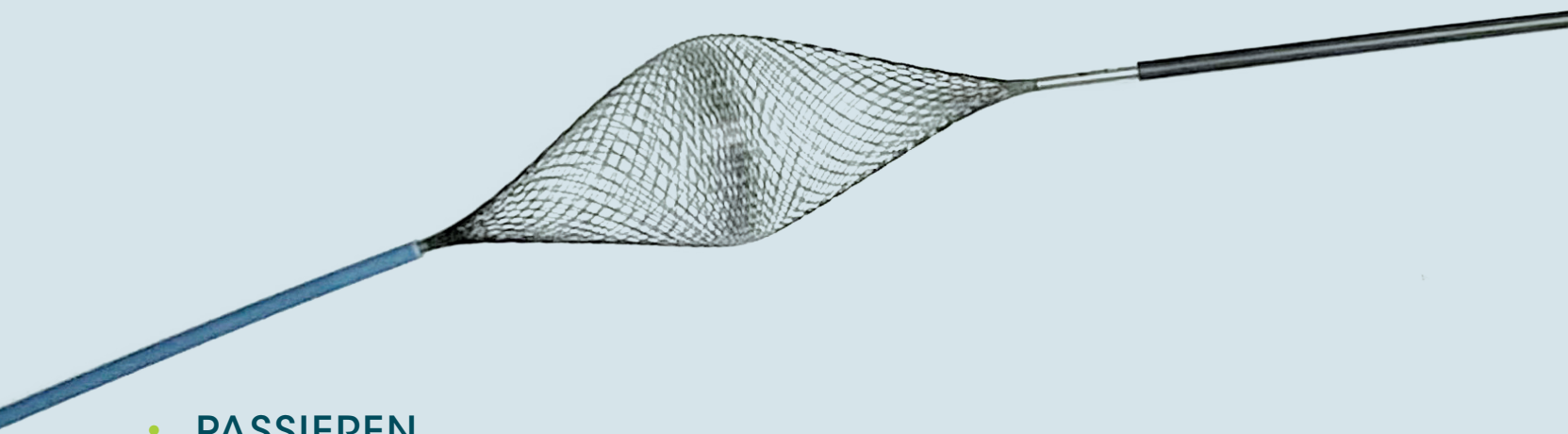


X-Filter™

ZUR VERHINDERUNG DER STEINMIGRATION

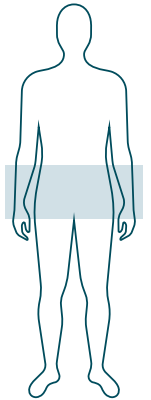


- **PASSIEREN**
Sichere und mühelose Navigation
über die Okklusion hinaus
- **FRAGMENTIEREN**
Verbesserte Steinertrümmerung
- **HALTEN**
Effektive Rückhaltung und Immobilisierung
von Steinfragmenten
- **KLÄREN**
Schnelle Entfernung von Steintrümmern
durch Spülung

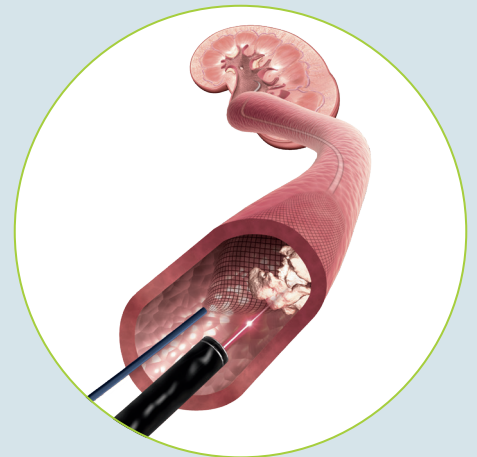


X-Filter™

ZUR VERHINDERUNG DER STEINMIGRATION

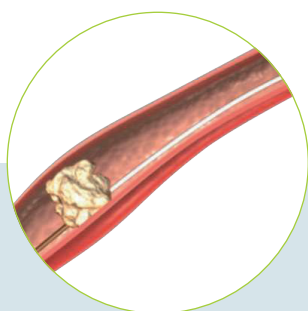


SCHRITT 1:

Die flexible Spitze wird am Stein vorbeigeführt und weiter in das Nierenbecken vorgeschoben.

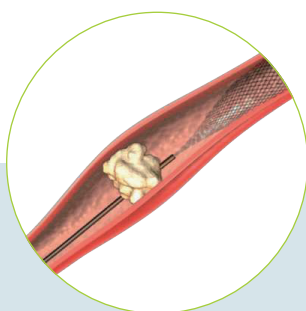

SCHRITT 2:

Das Nitinolgeflecht wird entlassen, um eine retrograde Migration von Steinfragmenten zu verhindern.

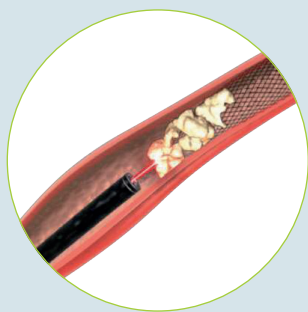


SCHRITT 3:

Das Ureteroskop wird neben dem X-Filter™ eingeführt und die Lithotripsie eingeleitet.



SCHRITT 4:

Schnelle Entfernung von Steintrümmern durch Spülung.

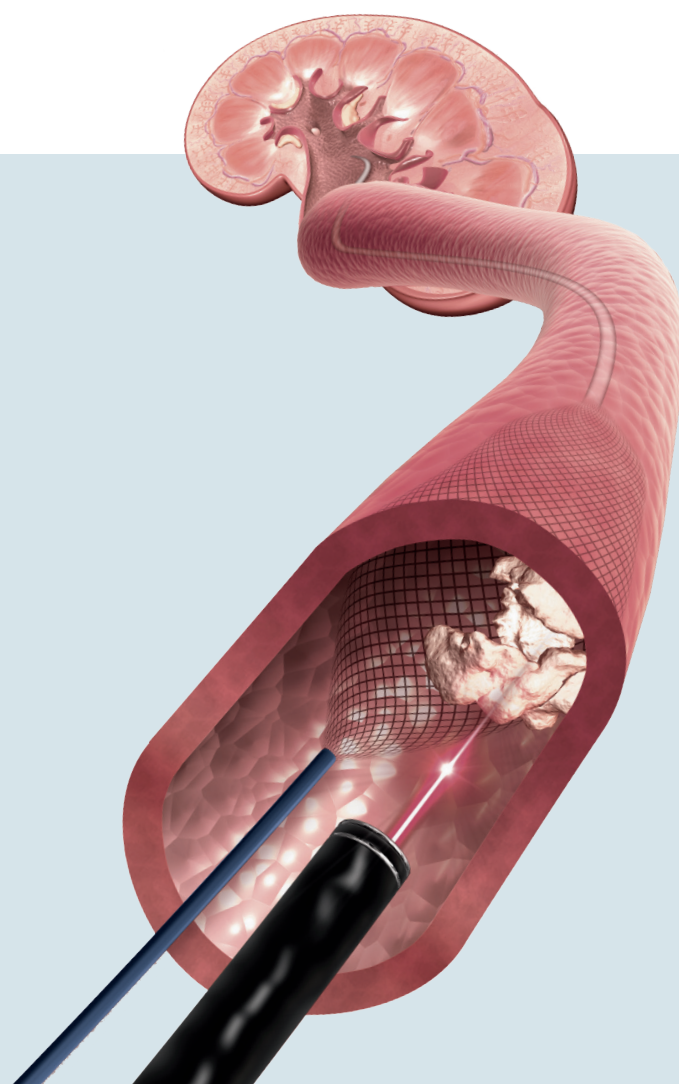

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Länge (cm)	ø F	Länge Spitze (cm)
ROXE363609ST	150	3,6	9

Hersteller:
Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco



Vertrieb durch:
optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11 | 76275 Ettlingen Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 | Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com | www.optimed.com
Order Code 9997-0009 DE | Rev. 01/2024 | © optimed

