
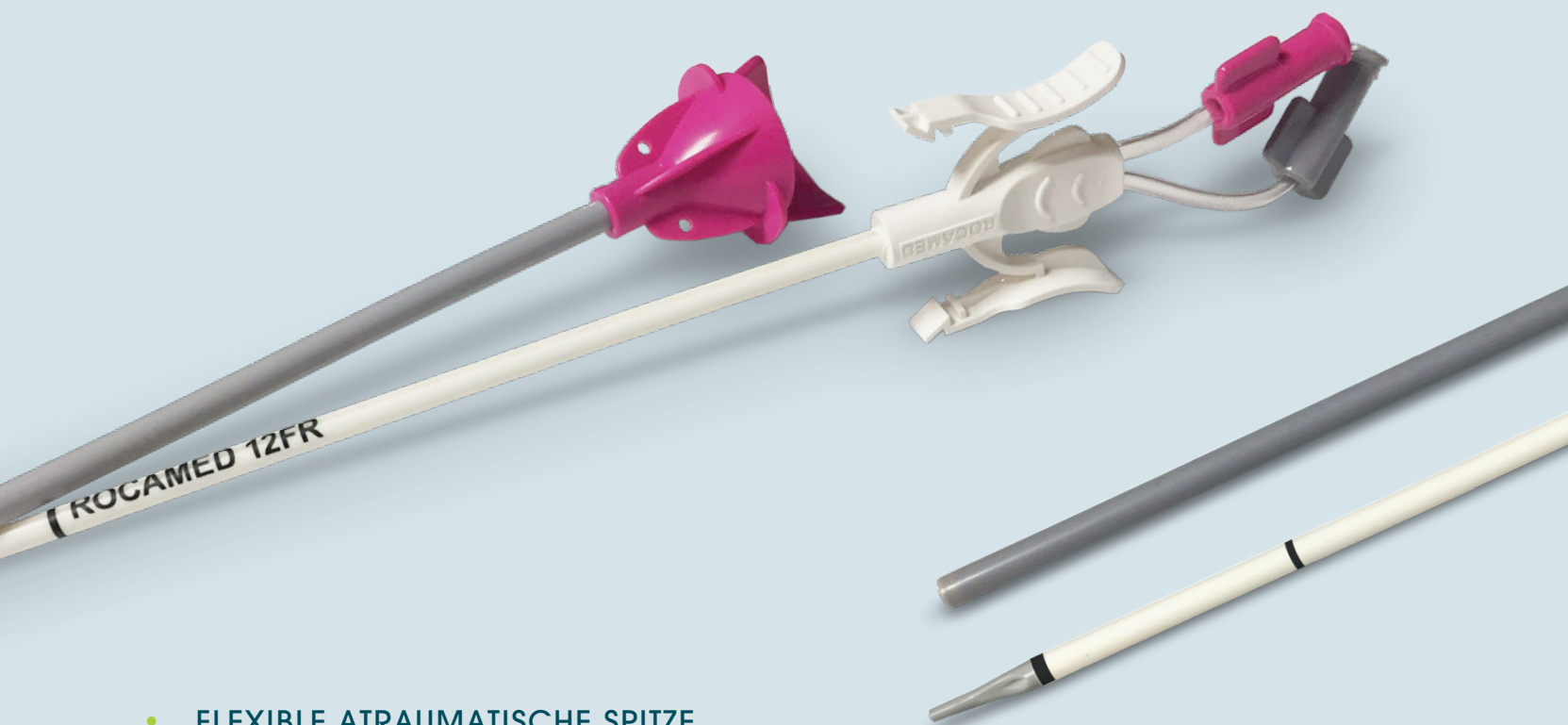


Bi-Flex Evo


HARNLEITERSCHLEUSE

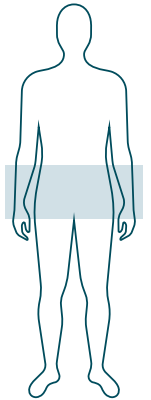

- FLEXIBLE ATRAUMATISCHE SPITZE
- GRADUIERTER INNERER TEIL
- KNICKFESTE INNENFEDER
- HYDROMER® HYDROPHILE BESCHICHTUNG
- DISTALER PLATINRING
- KONISCHE EINFÜHRSPITZE/DILATATOR
- GRÖßERER INNENDURCHMESSER

Bi-Flex Evo

HARNLEITERSCHLEUSE

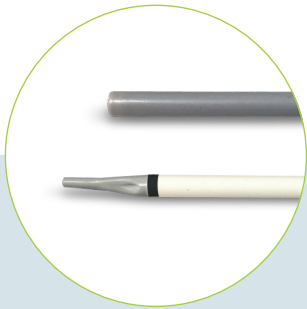

FLEXIBLE ATRAU- MATICHE SPITZE

Die neue flexible Spitze:
Für einen sicheren Zugang und ein atraumatisches Vorschieben in schwer zugänglichen Harnwegen.

Knickfeste Feder:
Stahlspitzen innerhalb der inneren Feder sorgen für Festigkeit und Stabilität und ermöglichen gleichzeitig ein einfaches Einführen und Herausziehen des Endoskops.




GRADUIERTER INNERER TEIL

Graduierter innerer Teil:
Zum Verstehen der Position, um die Dilatation des Harnleiters mit Präzision und Sicherheit zu messen.


Distaler Platinring:
Ermöglicht die Visualisierung unter Durchleuchtung zur Bestätigung der Position der distalen Spitze.

Konische Einführspitze / Dilator:
Konische Spitze für ein atraumatisches Einführen und Dilatation.

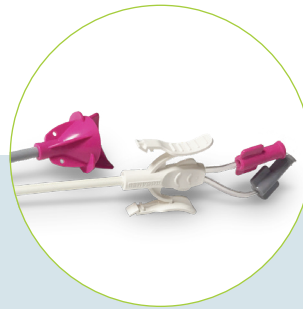

ZWEI ARBEITS- KANÄLE

Die Bi-Flex Evo Harnleiterschleuse wurde entwickelt, um die Navigation durch einen schwer zugänglichen Harntrakt zu erleichtern. Sie verfügt über zwei Arbeitskanäle und einen Dilator. Die beiden Arbeitskanäle mit einer Größe von jeweils 3 F verfügen über Luer-Lock-Anschlüsse, um das Legen eines Sicherheitsdrahtes und die Injektion eines Kontrastmittels zu ermöglichen.

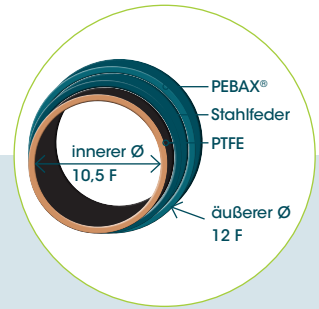

GRÖßERER INNENDURCH- MESSER

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Innerer Ø / F	Äußerer Ø / F	Länge cm	Beschreibung
ROUS1028ST	10	12	28	Bi-Flex Evo Harnleiterschleuse und Dilatations-Katheter
ROUS1228ST	12	14	28	
ROUS1035ST	10	12	35	
ROUS1235ST	12	14	35	
ROUS1045ST	10	12	45	
ROUS1245ST	12	14	45	

Hersteller:
Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco



Vertrieb durch:
optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11 | 76275 Ettlingen Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 | Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com | www.optimed.com
Order Code 9997-0006DE | Rev. 11/2023 | © optimed

